


IUC2 ドライバ Ver. 2.5 機能説明

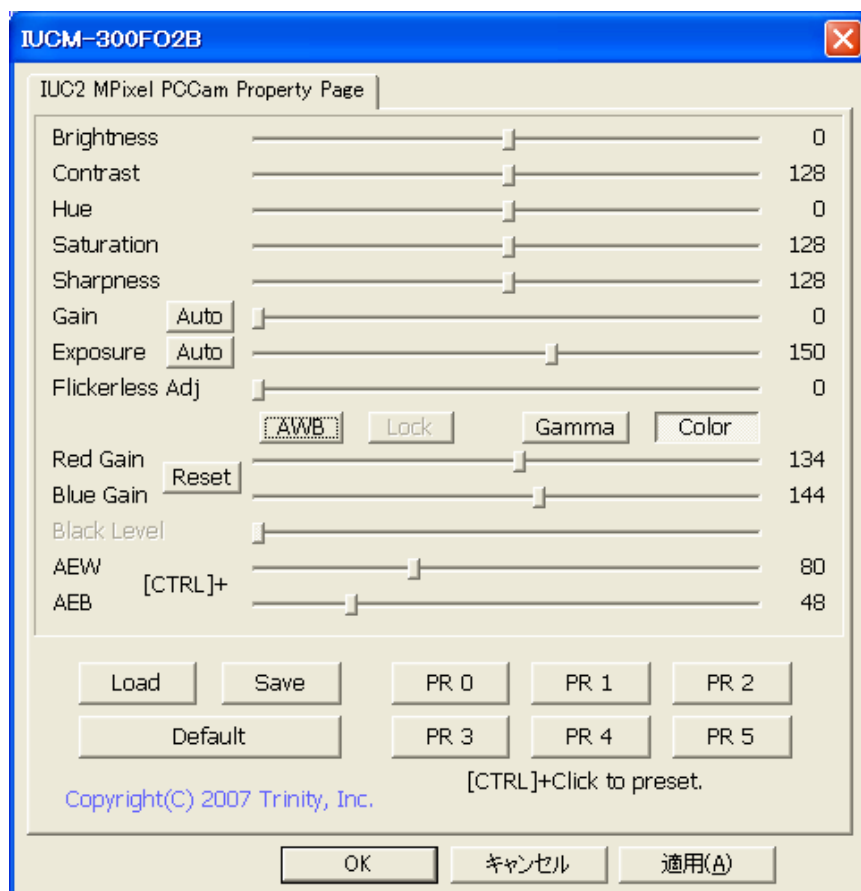

- Brightness** : 画像の明るさを調整します。
- Contrast** : 画像のコントラストを調整します。
- Hue** : 色相(色合い)を調整します。
- Saturation** : 彩度(色の濃さ)を調整します。
- Sharpness** : 鮮明度を調整します。
- Gain** : センサの感度を調整します。**Auto** で自動調整となります。
- Exposure** : 露光時間を調整します。**Auto** で自動調整となります。
- Flickerless Adj.** : 光源の状況により画像に現れる横縞をキャンセルします。
横縞が消える位置に調整して下さい。
なお、光源の状況によっては横縞が消えない場合もございます。
- AWB** : 自動白調整です。画像全体の平均を白色とみなし、自動で色調整を行います。
単色に近い対象物を観察するには適しません。
- Lock** : **AWB** で自動調整を行った状態をロックします。
- Gamma** : ガンマ調整です。
- Color** : カラー/モノクロを切り替えます。
- Red Gain** : 赤成分の強さを調整します。**AWB** オフの時のみ有効です。
- Blue Gain** : 青成分の強さを調整します。**AWB** オフの時のみ有効です。
- Black Level** : 黒レベル調整です。モノクロカメラのみ有効です。
- AEW、AEB** : **Gain**、**Exposure** 自動調整時の追従範囲の上下限です。
画像の輝度が、可能な限りこの範囲に入るように自動調整されます。
CTRL キーを押しながらドラッグすることで、**AEW**、**AEB** を単独で
変更できます。
- Save** : 設定を保存します。
- Load** : 設定を読み込みます。
- Default** : 工場出荷時の設定にします。
- PR0～PR5** : 設定のプリセットボタンです。**CTRL** キーを押しながらクリック
すると現在の値が記憶されます。